

## NOTICE D'UTILISATION PATIENT

**nowapi™**

Dispositif médical de téléobserance pour le suivi du traitement par Pression Positive Continue (PPC)



Votre PPC



Votre **nowapi™**



Votre santé

INNOVATION

## Consignes de sécurité



Eloigner **nowapi™** de toute source de chaleur, flamme, cheminée, radiateur...



Ne pas placer **nowapi™** à proximité d'un équipement susceptible d'interférer avec la transmission des données (par exemple : téléviseurs, ordinateurs, téléphones portables).



Ne pas graisser, ne pas lubrifier **nowapi™**.



Ne pas exposer **nowapi™** aux intempéries et aux projections d'eau.  
Ne pas immerger le dispositif ni le câble d'alimentation dans l'eau.



Procéder à un contrôle visuel de **nowapi™** périodiquement ou en cas de choc.



Débrancher avant de transporter.



Ne pas jeter.

## Que faire en cas d'incident ?



Bloc d'alimentation débranché.



Chaque semaine, nettoyer l'extérieur du boîtier et les embouts avec un linge humide et laisser sécher à l'air.

## Nettoyage de **nowapi™**

Ne pas ouvrir ou tenter de réparer **nowapi™**.  
Si besoin appeler le prestataire de santé à domicile.

Lire attentivement le manuel d'utilisation. Ce document vous est remis à titre d'information et n'a pas vocation à se substituer aux prescriptions de votre médecin traitant qui est et doit rester votre interlocuteur et conseil privilégié. Pour plus d'informations, demander conseil à votre médecin. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE.

Fabriquée par Air Liquide Medical Systems S.A.  
CE0459




NOWAPI est un **dispositif médical de téléobservance** permettant de renseigner votre médecin et votre prestataire de santé à domicile sur la **bonne utilisation de votre PPC**.

Des **conseils personnalisés** pourront vous être apportés pour un **traitement efficace et confortable**.


## Branchement du NOWAPI

- 1 Brancher le NOWAPI à la sortie d'air de la PPC ou de l'humidificateur.
- 2 Brancher le circuit patient raccordé au masque sur la sortie d'air de NOWAPI.
- 3 Placer la PPC en hauteur (sur la table de nuit) et laisser pendre le circuit patient.
- 4 Placer NOWAPI à l'horizontal, les indicateurs lumineux sur la face supérieure.
- 5 Vérifier systématiquement la compatibilité du réseau électrique.

Connecter le cordon d'alimentation à NOWAPI et brancher le bloc d'alimentation fourni sur secteur.

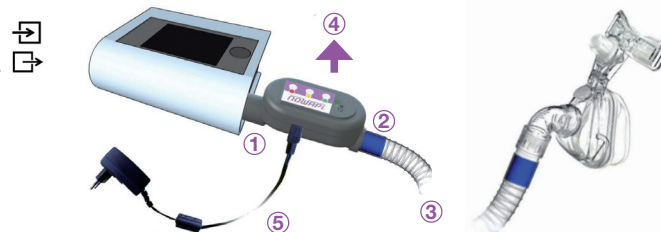

Respecter le sens du branchement

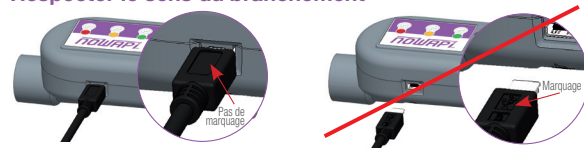

 **Avant chaque utilisation, contrôler que les éléments soient fermement connectés entre eux.**

 Débrancher avant de transporter.

## Devenez acteur de votre traitement !

L'efficacité de votre traitement est étroitement liée à la durée d'utilisation. Les indicateurs NOWAPI permettent d'évaluer si vous en faites une utilisation optimale.

### Aide au suivi de l'observance

Grâce à un témoin lumineux vous pouvez évaluer la durée de votre traitement à chaque arrêt de la PPC\*.



**Bonne utilisation**  
Bravo !  
Continuez ainsi !



**Utilisation insuffisante**  
Persévérez et essayez d'utiliser votre PPC plus longtemps.



**Utilisation très insuffisante**  
Persévérez et utilisez votre PPC plus souvent et plus longtemps.



GSM



### Transfert des données aux soignants

Une fois par jour, les données sont transmises automatiquement à votre prestataire. Les données pertinentes sont mises à disposition de votre médecin qui peut ainsi consulter votre dossier et affiner votre suivi.

\*Pendant les 16 dernières heures, pour faciliter la prise en charge du traitement.